

# Clearblue

## DIGITAL SCHWANGERSCHAFTSTEST

mit **WOCHENBESTIMMUNG**

Zeigt an, wieviele Wochen Sie schwanger sind

- ✓ Wenn Sie ab dem Fälligkeitstag der Periode testen, ob Sie schwanger sind, können Sie den Test zu jeder Tageszeit anwenden.
  - ✓ Wenn Sie diesen Test vor dem Fälligkeitstag der Periode vornehmen, verwenden Sie hierfür den Morgenerin.
  - ✓ Für ein genaues Ergebnis der Wochenbestimmung müssen Sie den Morgenerin verwenden.
  - ✓ Vermeiden Sie vor dem Test übermäßiges Trinken.
- Lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.**


### SCHRITT 1

#### ENTWEDER

Sie führen den Test **direkt im Urinstrahl** durch.

- n Halten Sie nur die saugfähige Testspitze nach unten zeigend **für genau 5 Sekunden** in Ihren Urinstrahl.
- n Achten Sie darauf, dass der übrige Teil des Tests dabei nicht nass wird.
- n Sie können die Schutzkappe wieder aufsetzen und den Test auf eine flache Unterlage legen.

5 SEKUNDEN

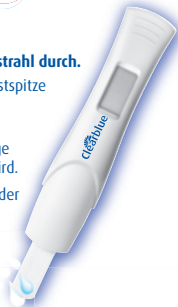

oder **in eine Urinprobe**. Nehmen Sie die **blaue Schutzkappe** ab. Warten Sie **20 Sekunden** nach.

Sie fangen eine Urinprobe in einem sauberen und trockenen Behälter auf.

- n Tauchen Sie nur die saugfähige Testspitze nach unten zeigend **für genau 20 Sekunden** in die aufgefangene Urinprobe.
- n Sie können die Schutzkappe wieder aufsetzen und den Test auf eine flache Unterlage legen.

20 SEKUNDEN



Halten Sie den Test während der gesamten Durchführung **niemals** mit der saugfähigen Testspitze nach oben.



### SCHRITT 2

- n Im Display beginnt das Symbol „Warten“ zu blinken. Dies zeigt an, dass der Test ausgewertet wird.
- n Wenn das Symbol „Warten“ nicht mehr blinkt, erscheint das Ergebnis. Wenn das Symbol „Warten“ nicht erscheint, lesen Sie bitte unter „Fragen und Antworten“ Frage 6.



### SCHRITT 3

Lesen Sie Ihr Ergebnis ab

Der **Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest** mit **Wochenbestimmung** zeigt an, welche ungefähre Anzahl an Wochen seit der Empfängnis vergangen ist. Dies wird zusammen mit dem Ergebnis „Schwanger“ auf dem Display angezeigt.

- n Innerhalb von **3 Minuten** wird Ihr Ergebnis im Display angezeigt.
- n Manchmal wird das Ergebnis „Schwanger“ auf dem Display angezeigt, **bevor** das Ergebnis der Wochenbestimmung erscheint. **Warten Sie weiter**, bis das Symbol „Warten“ nicht mehr blinkt, um das Ergebnis der Wochenbestimmung abzulesen. Dies kann bis zu 3 Minuten dauern.
- n Manchmal wird das Ergebnis schon nach 1 Minute angezeigt.
- n Ihr Ergebnis bleibt ca. 24 Stunden im Display ablesbar.
- n Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Er wird mit Ihnen den Verlauf der Schwangerschaft besprechen und Ihnen sagen, was Sie beachten müssen. Ihr Arzt wird Ihre Schwangerschaftswoche anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode bestimmen. Die Empfängnis erfolgt je nach Länge Ihres Zyklus etwa 2 Wochen danach. Die Wochenbestimmung nennt Ihnen die ungefähre Anzahl der seit Ihrer Empfängnis vergangenen Wochen.
- n Die Wochenbestimmung erfolgt mit einer Zuverlässigkeit von 92%<sup>\*\*</sup>. Die Angabe basiert auf der Konzentration des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin) in Ihrem Urin. Die Konzentration des hCG variiert von Frau zu Frau. Daher kann die Wochenbestimmung in seltenen Fällen irreführende Ergebnisse anzeigen. Die Zuverlässigkeit des Ergebnisses „Schwanger/Nicht Schwanger“ liegt über 99%<sup>\*\*\*</sup>, wenn ab dem Fälligkeitstag der Periode getestet wird.

### Bedeutung der Ergebnisse

Ergebnisse	Seit Empfängnis verstrichene Zeit	Wie Ihr Arzt Ihre Schwangerschaft datiert (basierend auf einem 28-Tage-Zyklus) <sup>†</sup>
Nicht Schwanger	<b>Ihr Ergebnis ist: Nicht Schwanger</b> Siehe Frage 12 in den Fragen und Antworten	-
Schwanger 1-2	<b>Ihr Ergebnis ist: Schwanger</b> und die Empfängnis fand vor etwa 1-2 Wochen statt.	3-4 Wochen
Schwanger 2-3	<b>Ihr Ergebnis ist: Schwanger</b> und die Empfängnis fand vor etwa 2-3 Wochen statt.	4-5 Wochen
Schwanger 3+	<b>Ihr Ergebnis ist: Schwanger</b> und die Empfängnis fand vor mehr als 3 Wochen statt.	Mehr als 5 Wochen

#### Fragen und Antworten

Bitte lesen Sie die häufig gestellten Fragen mit den entsprechenden Antworten.

#### Fehlersymbole

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlersymbole“, wenn Sie den Test durchgeführt haben und das Display keins der Ergebnisse auf dieser Seite anzeigt.

<sup>†</sup>Ihr Arzt wird Ihre Schwangerschaft ab dem ersten Tag der letzten Periode datieren, nicht ab dem Zeitpunkt der Empfängnis

## FRAGEN UND ANTWORTEN

### 1. Wie funktioniert der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung?

Wenn Sie schwanger sind, bildet Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Menge in Ihrem Körper steigt in der Frühschwangerschaft stetig an. **Clearblue** kann schon winzige Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests ist 25 mIU/ml). Je nach hCG-Menge in Ihrem Urin liefert der **Clearblue DIGITAL** mit Wochenbestimmung eine Schätzung für den Zeitpunkt der Empfängnis.

### 2. Wie zuverlässig ist der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest in Bezug auf den Nachweis einer Schwangerschaft?

Laut klinischen Tests ist der **Clearblue DIGITAL** Schwangerschaftstest ab dem Fälligkeitstag der Periode bei der Feststellung von „Schwanger“ oder „Nicht Schwanger“ über 99% zuverlässig<sup>\*\*\*</sup>. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ angezeigt wird, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Siehe Frage 4.

### 3. Wie zuverlässig ist der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest in Bezug auf die Wochenbestimmung?

Die Wochenbestimmung erfolgt mit einer Zuverlässigkeit von 92%<sup>\*\*</sup>. Die Angabe basiert auf der Konzentration des Schwangerschaftshormons hCG in Ihrem Urin. Die Konzentration des hCG variiert von Frau zu Frau. Daher kann die Wochenbestimmung in seltenen Fällen irreführende Ergebnisse anzeigen. Die Zuverlässigkeit des Ergebnisses „Schwanger/Nicht Schwanger“ liegt über 99%, wenn ab dem Fälligkeitstag der Periode getestet wird. Wenn Sie den Test mehr als 6 Wochen nach der Empfängnis durchführen, kann die Wochenbestimmung unerwartete Ergebnisse anzeigen. Der Grund dafür ist, dass die hCG-Menge im Urin zu hoch ist, um ein genaue Bestimmung der vergangenen Zeit seit Empfängnis vorzunehmen.

### 4. Wann kann ich mit dem Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung testen?

Sie können mit **Clearblue** bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode testen. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen und Sie haben das Ergebnis „Nicht Schwanger“, ist es trotzdem möglich, dass Sie schwanger sind. Die untenstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse klinischer Tests.

#### Testen vor Fälligkeit der Periode

**Clearblue** empfiehlt, erst ab dem Fälligkeitstag der Periode zu testen. Allerdings zeigt das Schwangerschaftshormon in der Frühschwangerschaft stark an, und mit **Clearblue** können Sie bereits bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode testen. Klinische Tests unter Verwendung von Urinproben schwangerer Frauen zeigten mit dem **Clearblue DIGITAL** Schwangerschaftstest folgende Ergebnisse<sup>\*\*</sup>:

Anzahl Tage vor Fälligkeit der Periode	% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ bekommen haben
-1	98%
-2	97%
-3	86%
-4	55%

Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und trotzdem eine Schwangerschaft vermutet wird, siehe Frage 12.

Um herauszufinden, wann Ihre Periode fällig ist, berechnen Sie Ihre Zykluslänge. Die Zykluslänge wird vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Beginn der nächsten Periode gerechnet.

- Wenn Ihr Zyklus unregelmäßig ist, sollten Sie vom längsten Zyklus in den vergangenen Monaten ausgehen.
- Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre Periode einsetzen soll, empfehlen wir, den Test frühestens 19 Tage nach dem letzten ungeschützten Geschlechtsverkehr durchzuführen.

### 5. Können Erkrankungen oder die Einnahme von Arzneimitteln das Ergebnis beeinflussen?

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen der einzelnemenden Arzneimittel sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.
- Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinträchtigen (diese Arzneimittel werden normalerweise injiziert). Wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind).
- Andere fruchtbarkeitsregulierende Behandlungen (wie etwa Omniphen), Schmerzmittel oder hormonelle Verhütungsmittel (z. B. Pille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
- Wenn Sie vor Kurzem ein hormonelles Verhütungsmittel abgesetzt haben oder eine fruchtbarkeitsregulierende Behandlung wie Omniphen durchgeführt haben, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein. Dadurch könnten Sie den Test möglicherweise zu früh durchführen.
- Wenn Sie erst vor Kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind.
- Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. In einer Studie nicht schwangerer Frauen kurz vor oder in den Wechseljahren, die mit verschiedenen Chargen von **Clearblue** getestet wurden, zeigten durchschnittlich 0,2% das Ergebnis „Schwanger“ in einem Bereich von 0% bis 0,5% für verschiedene Chargen. Alle falschen Ergebnisse wurden bei Frauen über 50 Jahren ermittelt.
- Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter (z. B. im Eileiter) und Zysten an Eierstöcken können das Testergebnis verfälschen.
- Multiple Schwangerschaften und Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter (z. B. im Eileiter) können die Wochenbestimmung verfälschen.
- Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, können Sie eventuell später herausfinden, dass Sie nicht schwanger sind, weil die Schwangerschaft auf natürliche Weise beendet wurde. Dies kann in der Frühschwangerschaft passieren. Unter diesen Umständen zeigt die Wochenbestimmung möglicherweise ein unerwartetes Ergebnis an.

Wenn Sie ein unerwartetes Ergebnis erhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

### 6. Ich habe den Test durchgeführt, aber das Symbol „Warten“ hat nicht zu blinken begonnen. Was bedeutet das?

Der Test wurde nicht korrekt durchgeführt. Bitte wenden Sie sich an den **Clearblue** Beratungsservice.

### 7. Ich habe den Test durchgeführt, aber das Display zeigt kein Ergebnis an. Was bedeutet das?

Ihr Ergebnis erscheint normalerweise innerhalb von 3 Minuten auf dem Display. Wenn kein Ergebnis erscheint, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersymbole.

### 8. Was tue ich, wenn mir der Test anzeigt, dass ich schwanger bin?

Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Er wird mit Ihnen den Verlauf der Schwangerschaft besprechen und Ihnen sagen, was Sie beachten müssen. Der **Clearblue DIGITAL** Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung ermittelt nur eine ungefähre Anzahl der vergangenen Wochen seit Empfängnis. Ihr Arzt wird Ihre Schwangerschaftswoche anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode bestimmen. Die Empfängnis erfolgt etwa 2 Wochen danach.

### 9. Der Test zeigt an, dass ich schwanger bin, aber ich glaube nicht, dass die Empfängnis zu dem Zeitpunkt stattfand, den die Wochenbestimmung nennt. Ist dies möglich?

Die Wochenbestimmung ist 92%<sup>\*\*</sup> zuverlässig, wenn der Test mit dem Morgenurin durchgeführt wird. Einige Arzneimittel oder Erkrankungen können das Ergebnis beeinflussen. Siehe Frage 5.

### 10. Ich habe gestern getestet, und das Ergebnis war „Schwanger“. Heute habe ich wieder getestet, und die Clearblue Wochenbestimmung zeigt eine geringere Zahl von Wochen seit der Empfängnis an. Was sollte ich tun?

Die Menge des Schwangerschaftshormons schwankt während des Anstiegs, daher kann es vorkommen, dass die **Clearblue** Wochenbestimmung aufeinander folgenden Tagen unerwartete Ergebnisse anzeigt. Testen Sie nochmals in 5 Tagen. Wenn die Wochenbestimmung dann immer noch eine geringere Zahl von Wochen seit der Empfängnis anzeigt, lesen Sie bitte Frage 11.

### 11. Ich habe vor einer Woche getestet, und das Ergebnis war „Schwanger“. Ich habe nochmals getestet, und die Clearblue Wochenbestimmung zeigt eine geringere Zahl von Wochen seit der Empfängnis an. Was sollte ich tun?

Wenn Sie beide Male gemäß den Anweisungen und mit dem Morgenurin getestet haben und die Wochenbestimmung unerwartete Ergebnisse anzeigt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

### 12. Was tue ich, wenn mein Test mir „Nicht Schwanger“ anzeigt?

Sie sind nicht schwanger, oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist noch nicht hoch genug, um nachgewiesen zu werden. Möglicherweise haben Sie sich bei dem Fälligkeitstag der Periode verrechnet.

- Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag der Periode getestet haben, testen Sie erneut am Fälligkeitstag der Periode.
- Wenn Ihre Periode überfällig ist, sollten Sie nach 3 Tagen einen weiteren Test durchführen. Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode noch immer nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

## FEHLERSYMBOL

**Buch-Symbol** – Während des Tests ist ein Fehler aufgetreten. Es kann sein, dass:

- die saugfähige Testspitze nicht nach unten gehalten wurde oder der Test nach der Anwendung nicht flach auf einer Unterlage lag,
  - zu viel oder zu wenig Urin verwendet wurde.
- Sie sollten noch einmal einen neuen Test vornehmen und dabei genau die Anwendungshinweise beachten.

**Leeres Display** – Wenn das Display nach der Anwendung nichts anzeigt, wenden Sie sich bitte an den **Clearblue** Beratungsservice.

## ENTSORGUNG DES TESTS

- Vor der Entsorgung des Tests bitte die Batterie entnehmen. Dazu eine Münze in den Schlitz am Ende stecken und durch Drehen die Rückseite des Tests aufbrechen.
- Batterie entnehmen und an die Verkaufsstelle oder die Schadstoffsammelstelle zurückgeben.
- Vorsicht: Batterie nicht zerlegen, nicht aufladen und nicht im Feuer entsorgen. Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten.
- Den Test bitte an die örtliche Schadstoffsammelstelle zurückgeben.
- Elektrogeräte nicht im Feuer entsorgen.

<sup>\*\*</sup> SPD Development Company Ltd, Bedford, England, April 2008  
<sup>\*\*\*</sup> SPD Development Company Ltd, Bedford, England, März 2008



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von EN 61326 hinsichtlich elektromagnetischer Störabstrahlung. Seine elektromagnetische Störabstrahlung ist also gering. Störungen durch andere elektrisch betriebene Geräte sind nicht zu erwarten. Dieser Test sollte jedoch nicht in unmittelbarer Nähe elektromagnetischer Störabstrahlungsquellen wie z. B. Mobiltelefonen verwendet werden, da diese eine ordnungsgemäße Funktion des Tests verhindern könnten. Um Beeinträchtigungen des Tests aufgrund elektrostatischer Entladung zu vermeiden, benutzen Sie den Test nicht in sehr trockener Umgebung, insbesondere wenn dort Synthetikmaterialien vorhanden sind.

Heimswangerschaftstest. Nur zum einmaligen Gebrauch. Nur zur in-vitro-Diagnostik [VDI]. Nicht einnehmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2% bis 30°C aufbewahren. Bei gekühlter Lagerung vor dem Testen 30 Minuten warten, bis der Test Raumtemperatur angenommen hat. Nicht verwenden, wenn die Folie des Tests beschädigt ist. Test nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Dieses Produkt enthält eine Batterie. Gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen. Diese Anwendungshinweise gelten für Modell Nummer 506981.

**Clearblue Beratungsservice** (Tonbandansage rund um die Uhr. Persönliche Beratung von Mo – Fr 08.00 – 16.00 Uhr außer an Feiertagen).

☎ 01803 / 000 153 ☎ 0820 / 001 148

Anrufe werden zum lokalen Tarif verrechnet und eventuelle Präsenzanrufe sind von dem Telefon-Anbieter abhängig. Bitte tragen Sie Ihren Telefon-Anbieter nach dem genannten Tarif. Bitte nennen Sie uns während Ihres Anrufs die Chargenbezeichnung (☐☐☐, seitlich auf der Packung). Anrufe können zur Qualitätskontrolle aufgezeichnet und mitgeteilt werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

[www.clearblue.info](http://www.clearblue.info)

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Hergestellt für: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genéve, Schweiz

**Clearblue** ist ein eingetragenes Warenzeichen. Marketing und Vertrieb: Procter & Gamble GmbH, 65823 Schwalbach, Deutschland