

clearblue

DIGITAL TEST DI GRAVIDANZA

con **INDICATORE DI CONCEPIMENTO**
concepimento

PASSO 1 Esegui il test

È POSSIBILE

Effettuare il test sotto il flusso dell'urina

- Rivolgi il tampone assorbente verso il basso e tienilo sotto il flusso dell'urina per soli **5 secondi**.
- Fai attenzione a non bagnare nessuna altra parte dello stick.
- Al termine puoi reinserire il cappuccio e appoggiare lo stick in posizione orizzontale.

5 SECONDI



...re il test, apri l'involucro sigillato dello stick e
...iliza lo stick immediatamente.

RE

Raccogliere un campione dell'urina in un recipiente pulito e asciutto

- Rivolgi il tampone assorbente verso il basso e immergilo nell'urina, come illustrato, per soli **20 secondi**.
- Al termine puoi reinserire il cappuccio e appoggiare lo stick in posizione orizzontale.

20 SECONDI



Per l'intera durata del test, non tenere **mai** lo stick con il tampone assorbente rivolto verso l'alto.



PASSO 2 Attendi...

- Il simbolo di attesa lampeggiante indicherà che il test è in corso.
- Quando il simbolo di attesa cessa di lampeggiare, verrà visualizzato il risultato. Se il simbolo di attesa non viene visualizzato dopo che hai eseguito il test, *fai riferimento alla domanda 6 nella sezione Domande e Risposte*.

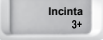


PASSO 3 Esamina il risultato

Il test di gravidanza **Clearblue DIGITAL** dispone di un **Indicatore di Concepimento** che fornisce una stima del periodo di concepimento. Questo dato viene visualizzato sul display insieme al risultato 'Incinta'.

- Il risultato verrà visualizzato sul display entro **3 minuti**.
- Il risultato 'Incinta' può essere visualizzato **prima** dell'Indicatore di Concepimento. **Continua ad attendere** fino a quando il simbolo di attesa cessa di lampeggiare per ottenere il risultato dell'Indicatore di Concepimento. Ciò potrebbe richiedere fino a 3 minuti.
- In alcuni casi, il risultato verrà visualizzato dopo 1 minuto.
- Il risultato rimarrà visualizzato sul display per circa 24 ore.
- Se il risultato del test è 'Incinta', consulta il tuo medico curante per avere i primi consigli sulla gravidanza. Il medico calcolerà la fase della gravidanza in base al primo giorno delle ultime mestruazioni. Il concepimento avviene intorno alla fine della 2 settimana da tale giorno e dipende dalla lunghezza del tuo ciclo mestruale. L'Indicatore di Concepimento fornisce una stima del periodo di concepimento.
- L'Indicatore di Concepimento è accurato nel 92% dei casi. La stima si basa sulla concentrazione dell'ormone della gravidanza hCG (gonadotropina corionica umana) nell'urina. Tale valore varia da donna a donna ed è pertanto possibile che i risultati forniti siano in alcuni casi fuorvianti. L'affidabilità del risultato 'Incinta / Non Incinta' è superiore al 99% se il test viene eseguito dal giorno in cui sono attese le mestruazioni.

Come interpretare i risultati

Risultati	Periodo del concepimento	Come il medico calcolerà la data di inizio della gravidanza (in base a un ciclo di 28 giorni)*
 Non Incinta	Il risultato del test di gravidanza è 'Non Incinta' <i>fai riferimento alla domanda 12 della sezione Domande e risposte.</i>	-
 Incinta 1-2	Il risultato del test di gravidanza è 'Incinta' e il concepimento è avvenuto 1-2 settimane fa.	3-4 settimane
 Incinta 2-3	Il risultato del test di gravidanza è 'Incinta' e il concepimento è avvenuto 2-3 settimane fa.	4-5 settimane
 Incinta 3+	Il risultato del test di gravidanza è 'Incinta' e il concepimento è avvenuto oltre 3 settimane fa.	>5 settimane

Domande e risposte

Questa sezione fornisce risposte alla domande più frequenti.

Errori del test

Leggi la sezione "Errori del test" se hai utilizzato lo stick per il test e il display non visualizza alcun risultato tra quelli illustrati in questa pagina.

*Il medico calcolerà la data di inizio della gravidanza a partire dal primo giorno delle ultime mestruazioni, non dalla data di concepimento.

DOMANDE E RISPOSTE

1. Come funziona il test di gravidanza Clearblue DIGITAL?

Se sei incinta il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (gonadotropina corionica umana). Nelle prime fasi della gravidanza la quantità di hCG nel corpo aumenta. **Clearblue** può rilevare concentrazioni molto ridotte dell'ormone nell'urina (La sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml). In base alla concentrazione di hCG nell'urina, l'indicatore di concepimento **Clearblue** fornisce una stima del periodo di concepimento.

2. Qual è il grado di affidabilità del test di gravidanza Clearblue DIGITAL?

Nei test di laboratorio il test di gravidanza **Clearblue DIGITAL** ha un'affidabilità del 99% nel rilevamento della gravidanza, se utilizzato a partire dal giorno in cui sono attese le mestruazioni. Se esegui il test prima di tale giorno e ottieni un risultato "Non Incinta", c'è ancora la possibilità che tu sia incinta. *Fai riferimento alla domanda 4.*

3. Qual è il grado di affidabilità dell'indicatore di concepimento Clearblue?

L'Indicatore di Concepimento è accurato nel 92% dei casi. La stima si basa sulla concentrazione dell'ormone della gravidanza hCG nell'urina. Tale valore varia da donna a donna ed è pertanto possibile che i risultati forniti siano in alcuni casi fuorvianti. L'affidabilità del risultato "Incinta / Non Incinta" è superiore al 99% se il test viene eseguito dal giorno in cui sono attese le mestruazioni.

L'Indicatore può fornire risultati inattesi se esegui il test più di 6 settimane dopo il concepimento. In questo caso la concentrazione di hCG nell'urina è troppo elevata per potere essere utilizzata per fornire una stima accurata del periodo di concepimento.

4. Quando posso eseguire il test di gravidanza Clearblue DIGITAL?

Il test di gravidanza **Clearblue DIGITAL** può essere eseguito fino a 4 giorni prima del giorno in cui sono attese le mestruazioni. Se esegui il test prima di tale giorno e ottieni un risultato "Non Incinta", c'è ancora la possibilità che tu sia incinta. La tabella seguente riassume i risultati di test clinici del test di gravidanza **Clearblue DIGITAL** nelle prime fasi della gravidanza.

Test nelle prime fasi della gravidanza

Clearblue consiglia di eseguire il test dal giorno in cui sono attese le mestruazioni. Tuttavia, la quantità di ormone della gravidanza aumenta rapidamente nelle prime fasi della gravidanza ed è possibile utilizzare **Clearblue** fino a 4 giorni prima del giorno in cui sono attese le mestruazioni. Nei test clinici eseguiti durante le prime fasi della gravidanza, il test di gravidanza **Clearblue DIGITAL** ha fornito i risultati seguenti:

Numero di giorni prima della data prevista di inizio delle mestruazioni	% di campioni di urina di donne incinte con risultato del test "INCINTA"
-1	98%
-2	97%
-3	86%
-4	55%

Se il risultato è negativo e sospetti comunque di essere incinta, fai riferimento alla domanda 12.

Per calcolare il giorno in cui sono attese le mestruazioni, calcola la lunghezza del ciclo contando il numero dei giorni che intercorrono tra il primo giorno delle mestruazioni sino al giorno precedente all'inizio del ciclo successivo.

- Se hai cicli irregolari, devi considerare il ciclo più lungo degli ultimi mesi prima di eseguire il test.
- Se non sai quando può terminare il ciclo, ti consigliamo di eseguire il test dopo non meno di 19 giorni dall'ultimo rapporto sessuale non protetto.

5. Quali farmaci o condizioni mediche possono alterare il risultato?

- Prima di eseguire un test, leggi sempre il foglio illustrativo di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
- I farmaci per la fertilità che contengono hCG possono causare risultati fuorvianti (tali farmaci sono di solito somministrati per via intramuscolare e se il test viene eseguito troppo presto dopo la somministrazione, si potrebbe ottenere un falso risultato "Incinta").
- Altre terapie per la fertilità (come il clomifene citrato), gli antidolorifici e i contraccettivi ormonali (ad es. la pillola) non alterano il risultato del test.
- Se hai interrotto recentemente la contraccezione ormonale o stai seguendo terapie per la fertilità, come quella con clomifene citrato, il tuo ciclo mestruale potrebbe essere irregolare e quindi potresti eseguire il test troppo presto.
- Se recentemente sei stata incinta (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato "Incinta".
- Se stai entrando o sei in menopausa, potresti ottenere un falso risultato positivo. Uno studio condotto su donne non incinte in perimenopausa e menopausa che hanno eseguito il test con lotti diversi di **Clearblue** ha mostrato una media del 0,2% di risultati positivi, con una variazione dal 0% al 0,5% per lotti diversi. Tutti i falsi risultati erano relativi a donne di età superiore ai 50 anni.
- La gravidanza ectopica e le cisti ovariche possono causare risultati fuorvianti.
- Le gravidanze multiple ed ectopiche possono fornire indicazioni del periodo di concepimento fuorvianti.
- Nelle prime fasi della gravidanza, è possibile che questa si interrompa per cause naturali. Se ottieni un risultato "Incinta", è possibile che in un secondo momento scopra di non essere incinta a causa di un'interruzione naturale. In questi casi l'indicatore di concepimento può fornire risultati inattesi.

Se ottieni risultati inattesi, consulta il tuo medico curante.

6. Ho eseguito il test, ma il simbolo di attesa non è stato visualizzato. Cosa significa?

Il test non ha funzionato correttamente. Contatta l'assistenza clienti di **Clearblue**.

7. Ho eseguito il test ma non è stato visualizzato alcun risultato sul display. Cosa significa?

Il risultato dovrebbe essere visualizzato sul display entro 3 minuti. In caso contrario, fai riferimento alla sezione Errori del test.

8. Il test indica che sono incinta. Cosa devo fare?

Se il risultato del test è "Incinta", consulta il tuo medico per avere i primi consigli sulla gravidanza. L'Indicatore di Concepimento **Clearblue** fornisce solo una stima del periodo di concepimento. Il medico calcolerà la fase della gravidanza in base al primo giorno delle ultime mestruazioni. Il concepimento si verifica circa 2 settimane dopo tale giorno.

9. Il test indica che sono incinta ma non credo che il concepimento sia avvenuto nel periodo stimato dall'indicatore. È possibile?

L'Indicatore di Concepimento è accurato nel 92% dei casi se esegui il test utilizzando la prima urina del mattino. Alcuni farmaci o condizioni mediche possono alterare il risultato. *Fai riferimento alla domanda 5.*

10. Ho eseguito il test ieri e il risultato era "Incinta". Ho eseguito nuovamente il test oggi e, in base all'indicatore di Concepimento Clearblue, il numero di settimane dal concepimento si è ridotto. Cosa devo fare?

Il livello di hCG in aumento è soggetto a fluttuazioni ed è pertanto possibile che l'Indicatore di Concepimento **Clearblue** fornisca risultati inattesi se il test viene eseguito per più giorni consecutivamente. Esegui nuovamente il test dopo 5 giorni e, se in base all'Indicatore di Concepimento il numero di settimane dal concepimento è ancora ridotto, fai riferimento alla domanda 11.

11. Ho eseguito il test una settimana fa e il risultato era "Incinta". Ho eseguito nuovamente il test oggi e, in base all'indicatore di Concepimento Clearblue, il numero di settimane dal concepimento si è ridotto. Cosa devo fare?

Se hai eseguito il test seguendo le istruzioni e utilizzando in entrambi i casi la prima urina del mattino e l'Indicatore di Concepimento fornisce risultati inaspettati, consulta il tuo medico.

12. Il test indica che "Non Incinta". Cosa devo fare?

Potresti non essere incinta, oppure l'ormone della gravidanza potrebbe essere presente in quantità insufficienti per essere rilevato, oppure potresti avere calcolato male il giorno in cui erano attese le mestruazioni.

- Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il giorno in cui sono attese le mestruazioni.
- Se le mestruazioni sono in ritardo, esegui nuovamente il test dopo 3 giorni. Se il nuovo test fornisce un risultato negativo e le mestruazioni sono ancora in ritardo, consulta il tuo medico.

ERRORI DEL TEST

Simbolo del libro: si è verificato un errore durante il test. Le cause possibili sono:

- Il tampone assorbente non è stato tenuto rivolto verso il basso oppure lo stick non è stato appoggiato in posizione orizzontale dopo l'applicazione dell'urina.
- È stata applicata una quantità di urina insufficiente o troppo elevata.

Esegui nuovamente il test utilizzando un nuovo stick e seguendo scrupolosamente le istruzioni.

Nessun simbolo - se non viene visualizzato alcun simbolo sul display dopo che hai utilizzato il test, contatta l'assistenza clienti di **Clearblue** per ulteriori informazioni.

SMALTIMENTO DELLO STICK DEL TEST

- Prima di smaltire lo stick, rimuovi la batteria interna. Inserisci una moneta nella fessura all'estremità e ruotala per aprire il retro dello stick.
- Rimuovi la batteria e smaltiscila seguendo le normative locali sul riciclo. Attenzione: non smontare, ricaricare o gettare nel fuoco la batteria. Non ingoiarla e non tenerla a portata di mano dei bambini.
- Smaltisci lo stick del test seguendo le normative locali sul riciclo delle apparecchiature elettriche.
- Non gettare nel fuo. Alcuni apparecchiatura elettrica.



Questo dispositivo è conforme ai requisiti sulle emissioni elettromagnetiche EN61326 ed emette pertanto quantità ridotte di onde elettromagnetiche. Non è soggetto a interferenze dovute ad altre apparecchiature elettriche. Non eseguire il test in prossimità di sorgenti intense di radiazioni elettromagnetiche, ad es. telefoni cellulari, che potrebbero impedire il corretto funzionamento. Per evitare scariche elettrostatiche, non utilizzare il test in ambienti eccessivamente asciutti, specialmente in presenza di materiali sintetici.

Test di gravidanza per uso domestico. Monouso. Solo per uso diagnostico in vitro (IVD). Non per uso interno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperature comprese tra 2°C e 30°C. Se conservato a temperature basse, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima dell'uso. Non usare se l'involucro sigillato dello stick è danneggiato. Non usare lo stick dopo la sua data di scadenza. Questo prodotto contiene una batteria. Smettere la batteria attendendosi alle normative locali. Queste istruzioni si riferiscono al modello 507082.

Linea Assistenza Clearblue (i nostri operatori sono disponibili dalle 8 alle 16 da lunedì a venerdì - esclusi i festivi)

848 782 110

Le chiamate sono a tariffa locale e possono variare in base alla compagnia telefonica a cui ci si appoggia. La preghiamo di controllare con la sua compagnia per conoscerne l'esatto costo.

Siate pronti a citare il numero di telefono 848 782 110 alla

te chiamante saranno registrate al fine di training e controllo qualità. Esclusivamente per assistenza tecnica.

www.Clearblue.info

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Fabbricato per: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue è un marchio di fabbrica.