

Clearblue **+PLUS** Graviditetstest

Norsk

Clearblue er mer enn 99% sikker fra den dagen du venter menstruasjonen.

Clearblue kan brukes opptil 4 dager før menstruasjonen er ventet.

Les denne bruksanvisningen nøye før du utfører testen.

1 Utføre testen

Hvis du utfører testen samme dag som du venter menstruasjonen, kan du utføre den når som helst på dagen.

Hvis du utfører testen før, må du bruke dagens første urin.

- Når du er klar til å utføre testen, fjerner du folien rundt testpinnen og tar av den blå hetten. Testpinnen må brukes omgående.



Teste i urinen

Du kan teste direkte i urinstrålen eller i en urinprøve som du har tatt i en ren og tørr beholder.

- Hold oppsugingsdelen med spissen ned i urinstrålen eller hold oppsugingsdelen i urinprøven, se bildet, **i bare 5 sekunder**.
- Oppsugingsdelen farges fort rosa for å vise at urin absorberes. **Du må fortsette å holde oppsugingsdelen i urinen til det er gått 5 sekunder.**
- Fortsett å holde oppsugingsdelen med spissen ned eller legg testpinnen flatt til det vises en strek i Kontrollvinduet.
- Hvis du vil, kan du sette hetten på igjen.



Se spørsmål 5 under Spørsmål og Svar hvis oppsugingsdelen ikke farges helt rosa.

2 Vent 2 minutter


- En blå strek i Kontrollvinduet viser at testen er vellykket gjennomført
- Du kan avlese resultatet ditt etter **2 minutter**.
- Ikke les av resultatet før denne streken kommer til syne.**
- Hvis det ikke vises en blå strek i Kontrollvinduet i løpet av **10 minutter**, har ikke testen fungert (se spørsmål 6 under Spørsmål og Svar).



VIKTIG! Les av resultatet innen **10 minutter** etter at du har utført testen. Se bort fra alle eventuelle endringer i resultatet etter dette.

3 Lese av resultatet

Du kan nå lese av resultatet i Resultatvinduet.

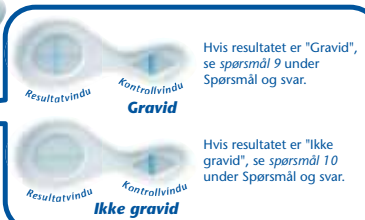

Hvis resultatet er "Gravid", se spørsmål 9 under Spørsmål og svar.

Hvis resultatet er "Ikke gravid", se spørsmål 10 under Spørsmål og svar.

Det har ingen betydning om en del av plusstegnet '+' er svakere eller sterkere. Resultatet er gravid:

Bilde A

Bilde B

Bilde C



Hvis du fremdeles er usikker på resultatet, kan du se spørsmål 7 under Spørsmål og Svar for mer informasjon.

Spørsmål og Svar – Les gjerne under, der du får svar på de vanligste spørsmålene.

Spørgsmål og svar

1 Hvor pålidelig er Clearblue?

Laboratorieforsøg har vist, at **Clearblue** er mere end 99% sikker, når den bruges fra den dag, menstruationen forventes at begynde.

2 Hvordan virker Clearblue?

Når du er gravid, producerer kroppen hormonet hCG (humant koriongonadotropin). Mængden af hCG i kroppen øger i de første stadier af graviditeten. **Clearblue** kan registrere små mængder af dette hormon i urinen.

3 Hvornår kan jeg bruge Clearblue?

Clearblue kan bruges op til 4 dage før forventet menstruation. Hvis du udfører testen før forventet menstruation og får et "Ikke gravid"-resultat, er der stadig en chance for, at du er gravid. I nedenstående tabel kan du se resultaterne af de kliniske forsøg med tidlig testning med **Clearblue**.

Tidlig testning	
Clearblue anbefaler at du tester fra den dag du forventer at få din menstruation. Mængden af graviditetshormon stiger hurtigt tidligt i graviditeten og Clearblue kan bruges op til 4 dage før din forventede menstruation.	
I kliniske forsøg med prøver tidligt i graviditetstilfældet gav Clearblue følgende resultater:	
Antal dage for forventet menstruation	% af prøver fra gravide kvinder, som gav resultatet "Gravid"
-1	87%
-2	84%
-3	74%
-4	53%

For at finde ud af, hvornår du kan forvente at få menstruation, skal du beregne, hvor lang din cyklus normalt er, ved at tælle antallet af dage fra den første dag af menstruationen til dagen før næste menstruation begynder.

- Hvis du har uregelmæssige cyklusser, skal du foretage beregningen ud fra den længste cyklus, du har haft i løbet af de sidste måneder, før du udfører testen.
- Hvis du ikke ved, hvornår du skal have menstruation, anbefaler vi, at du tester tidligst 19 dage efter, at du sidst havde samleje uden prævention.
- Hvis du foretager testen fra den dag, du forventer at få menstruation, kan du teste når som helst på dagen. Hvis du tester tidligt, skal du bruge den første morgenurin. Undlad at drikke store mængder væske, før du udfører testen.
- Hvis resultatet er "Ikke gravid", og du stadig har mistanke om, at du er gravid, kan du se spørgsmål 10.

4 Kan medicin eller sygdom påvirke resultatet?

- Hvis du tager medicin, skal du altid læse indlægssedlen til denne, før du udfører testen.
- Hormonpræparater, som indeholder hCG, kan give misvisende resultater (disse hormonpræparater indgives sædvanligvis som injektioner, og hvis du tager testen for tidligt efter en sådan injektion, kan resultatet fejlagtigt blive "Gravid").
- Andre hormonbehandling (som indeholder klomifen), smertestillende medikamenter og hormonelle præventionsmidler (for eksempel p-piller) påvirker ikke resultatet.
- Hvis du for nylig er holdt op med at bruge hormonel prævention eller bruger hormonpræparater, som indeholder klomifen, kan menstruationen være uregelmæssig, hvilket kan medføre, at du tester for tidligt.
- Hvis du for nylig har været gravid (selvom graviditeten blev afbrudt), kan testresultatet fejlagtigt blive "Gravid".
- Graviditet uden for livmoderen, cyster på æggestokkene, overgangsalderen og visse sjældne sygdomme kan give misvisende resultater.
- Hvis resultatet er "Gravid", vil du muligvis senere konstatere, at du ikke er gravid, på grund af den naturlige graviditetsafbrudelse, som kan optræde i de tidlige stadier.

Hvis resultatet ikke er som forventet, bør du rådføre dig med din læge.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om **Clearblue**, kan du ringe til

Clearblue Produktrådgivning.

80 88 60 29 *Samtalen er gratis*

Du bør have pakken ved hånden, så du kan opgive produktionsnummeret **LO1**. Samtalen kan blive taget op i kvalitetssikringsøjemed.

5 Jeg har brugt graviditetstesten, men den sugende del er ikke blevet helt rosa. Hvad skal jeg gøre?

Hvis den sugende del ikke farves helt rosa, kan det skyldes, at den ikke er fugtet med en tilstrækkelig mængde urin. Hvis der imidlertid fremkommer en blå strej i kontrolruden inden 10 minutter efter, at du har taget testen, har testen fungeret, som den skal. Hvis der ikke fremkommer en blå strej i kontrolruden inden for 10 minutter, se spørgsmål 6.

6 Jeg har brugt graviditetstesten, men der fremkommer ingen blå strej i kontrolruden. Hvad skal jeg gøre?

Hvis der ikke er fremkommet en blå strej i kontrolruden inden 10 minutter efter, at du har udført testen, er testen ikke gennemført med vellykket resultat. Det kan skyldes, at

- Den sugende del ikke blev holdt ned. Testpinden ikke blev lagt fladt ned, da den var fugtet med urin.
- Der blev brugt for meget eller for lidt urin. **Den sugende del skal holdes i urinstrålen/urinprøven i 5 sekunder.**

Læs anvisningerne én gang til, og udfør testen igen med en ny testpind. Du kan eventuelt indsamle urinen i en ren, tør beholder og bringe den sugende del i urinen i kun 5 sekunder.

7 Hvad betyder resultatet?

- For at resultatet kan være "Gravid", skal der fremkomme en blå strej i kontrolruden og et plusstegn '+' i resultatruden inden 10 minutter efter, at du har udført testen. Utsæendet på plusstegen '+' i resultatruden kan variere, de linjer, der er repræsenteret af symbolet '+', og linjen i Kontrolruden skal have samme bredde (se billede A-C her ovenfor).

Billede A

Dette resultat vises mest sandsynligt, når du er gravid og udfører testen mere end et par dage efter, at du forventer at få menstruation, fordi hCG-niveauet er højere.

Billede B

Dette resultat er ikke ualmindeligt, når du er gravid og foretager testen på samme eller omtrent samme dag, som du forventer at få menstruation, fordi hCG-niveauet stadig er relativt lavt.

Billede C

Også her er resultatet "Gravid".

Hvis du stadig er usikker på dit resultat, skal du vente i mindst 3 dage, før du udfører testen igen, og sørg for at følge brugsanvisningen nøje.

- For at resultatet kan være "Ikke gravid", skal der være en blå strej i kontrolruden og et '-'-symbol i resultatruden inden for 10 minutter efter udførelse af testen. Hvis resultatet er "Ikke gravid", og du stadig har mistanke om, at du er gravid, kan du se spørgsmål 10.

8 Hvor længe vil resultatet vare?

Resultatet kan aflæses når som helst i op til 10 minutter. Efter 10 minutter skal du se bort fra eventuelle ændringer i resultatet.

9 Testen viser, at jeg er gravid. Hvad skal jeg gøre?

Hvis testen viser, at du er gravid, bør du kontakte en læge, som kan vejlede dig om, hvad du bør foretage dig i det videre forløb.

10 Testen viser, at jeg ikke er gravid. Hvad skal jeg gøre?

Du er muligvis ikke gravid, eller mængden af graviditetshormon er muligvis endnu ikke høj nok til at påvise, eller du kan have fejlberegnet datoen for, hvornår du skulle have menstruation.

- Hvis du testede tidligt, skal du teste igen, når du skal have menstruation.
- Hvis din menstruation er udeblevet, skal du teste igen efter 3 dages tid. Hvis denne test giver et "Ikke gravid"-resultat, og du stadig ikke har fået menstruation, bør du kontakte din læge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger og generelle råd om graviditetsspørgsmål, kan du besøge vores hjemmeside:

www.Clearblue.info

Denne enhed er beregnet til hjemmebrug. Opbevares ved stuetemperatur.

Oplæsningen er tilgængelig for børn. Kun til in vitro-diagnoser. **IVD**

Til engangsbrug. Bortskaffes med dagrenovationen.

Må ikke bruges, hvis beskyttelsesfolien er beskadiget.

Må ikke bruges, hvis udløbsdatoen er overskredet

