

Ovulation Test

Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test is the only Ovulation Test to typically identify **YOUR 4 best days to get pregnant, 2 more than other ovulation tests.**

How the test works

The test works by monitoring changes in 2 key fertility hormones – Luteinizing hormone (LH) and estrogen – in urine. The LH surge happens about 24-36 hours before an egg is released from the ovaries – this is ovulation. Detecting the LH surge indicates you are at Peak Fertility. The estrogen level rises in the days before the LH surge and helps the body prepare for ovulation. Detecting the rise in estrogen indicates you are at High Fertility. Having intercourse on High and Peak Fertility days maximizes your chance of getting pregnant. This example shows how Low, High and Peak Fertility days could appear in a cycle.

Determine your cycle length

Note the day your period starts (first day of full menstrual flow) as day 1, and then count through to the day before your next period starts. The total number of days is your cycle length. If your cycle varies, see Q1.

Determine when to start testing

Use the table below to determine which day to start testing. If you don't know your cycle length you should wait at least one menstrual cycle, note the length of it and then use the table below.

Length of your cycle (days)	21 or less	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 or More
Not the day your period starts as Day 1, start testing on the day shown under your cycle length.	5	6	6	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20 days before you expect your next period

Always test using the **first urine** after your longest sleep.

How to take a test

1 When you are ready to test

- Remove a test stick from its foil wrapper.
- Remove the cap from the test stick.



2 Insert the test stick into the holder



- Make sure the purple arrows line up as shown.
- The test will switch on when you have correctly inserted the test stick into the holder.



New Cycle Indicator (Flashing)

- The first time you use the test the new cycle symbols will **flash** briefly. If these symbols are shown and it is not the first time you've used the test see Q12.



Test Ready

- The test ready symbol will then be shown.
- You should now take the test right away.

- If the test ready symbol is not shown OR if the display has gone blank eject the test stick and re-insert it carefully.
- If the test ready symbol still isn't shown see Q21.


3 Choose which way to take your test

Either

- Place just the absorbent tip pointing downwards in your urine stream for 3 seconds.
- Take care not to get the holder wet.

Or

- You can collect a sample of your urine in a clean, dry container.
- Dip just the absorbent tip in your collected urine sample for 15 seconds.

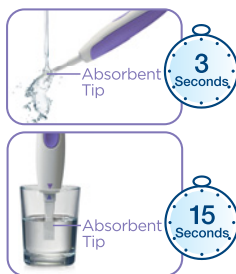

4 Wait for your result



Within 1 minute you will see that the test is working as the test ready symbol will start to **flash**.



After 5 minutes the display will show your result.

- If the test ready symbol does not start flashing, see Q4.

5 Reading your result



Low Fertility

- Having intercourse today is just for fun as it's unlikely, but not impossible, that you will become pregnant. Test again tomorrow using the first urine after your longest sleep. Your result will be displayed for 8 minutes.
- If the display goes blank after testing and you think you have missed seeing your result, simply eject the test stick and your result will re-appear for a further 2 minutes.




High Fertility

- Have intercourse today to increase your chance of becoming pregnant. Remember you must still test again tomorrow using the first urine after your longest sleep. Your result will be displayed for 8 minutes.



Peak Fertility


- This is your most fertile time and will be displayed for 2 days. Have intercourse during these 2 days to maximize your chance of becoming pregnant. You can stop testing after the first day Peak Fertility is displayed. If you have any unused test sticks save these and the holder for your next cycle.

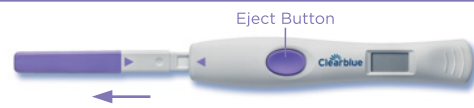

6 When you've finished testing

- Eject your test stick as soon as possible after you have seen your result and dispose of it in your normal household waste.

Please read this leaflet carefully before taking a test.

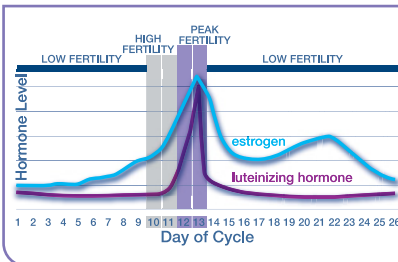

FURTHER INFORMATION

Using the holder again in the same cycle

When you are ready to test again follow the instructions from step 1 using a new test stick. If your result is still displayed you need to wait for the display to go blank before taking another test.

Using the holder again in a new cycle

If you are using the test for another cycle the new cycle indicator will flash briefly when you insert a test stick on the first day of testing. This shows that the test is ready to use. Follow the instructions to determine when to start testing and how to take a test. If this error is displayed see Q20.

Recycling the batteries and throwing the holder away

Remove all batteries from the test holder by separating the upper and lower halves starting at the end nearest the display. Remove all batteries from under the central metal cover. Dispose of the batteries according to the appropriate recycling scheme. **Caution:** Do not take apart, recharge, or dispose of the batteries in fire. Do not swallow. Keep away from children. Dispose of the rest of the holder according to the appropriate recycling scheme for electrical equipment. Do not dispose of electrical equipment in fire.

QUESTIONS & ANSWERS

1 My cycle length varies, when should I start testing?

If your cycle length varies by more than 3 days, you should use the length of your last cycle to determine when to start testing.

2 What if I missed testing with the first urine after my longest sleep?

You should test as soon as you can but avoid excess fluid intake before testing. If you do not use the first urine after your longest sleep you may see unexpected High Fertility results so it is important that you remember to use the first urine after your longest sleep.

3 Can I buy more test sticks or use the holder with test sticks from any other product?

No. Test sticks are not available separately. You can only use test sticks for the Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test with the holder.

4 I have taken a test, but the test ready symbol has not started flashing. What does this mean?

The test has not been taken correctly. An error symbol will appear on the display within 10 minutes of testing. You should test again with a new test stick. See 'Using the holder again in the same cycle'.

5 What if the holder gets wet?

You should wipe it dry. Some splashing is not a problem, but if it gets very wet the holder may be damaged. If this happens the display will either remain blank or an error symbol will be displayed.

6 I have taken a test, but no result has appeared. What does this mean?

Your result should be displayed 5 minutes after the test ready symbol begins to flash. If no result appears an error symbol will be displayed within 10 minutes. See 'Error messages'.

7 Can I determine my result from the lines on the test stick?

No. The result can only be read on the display and cannot be determined from any lines you might see when you eject the test stick.

8 How accurate is Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test?

A laboratory trial has shown the test to be over 99% accurate in detecting the LH surge (Peak Fertility). The sensitivity of the LH detection in Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test is 40mIU/ml measured against the Third International Standard for urinary LH and FSH for Bioassay (71/264).

9 I've used 10 tests in a cycle and not seen High and/or Peak Fertility. Should I stop testing and use the rest of my tests next cycle?

There are enough test sticks in this pack for

most women with regular cycles to detect their High and Peak Fertility for 2 cycles. It is possible that if your cycle length varies by more than 3 days, you may need to take more tests. You should carry on testing until you see Peak Fertility and if you need more test sticks for your next cycle you can use tests from a new pack with the same holder.

10 I've taken all the tests as instructed, but have not seen High and/or Peak Fertility. What should I do?

If you have used all 20 tests you may wish to wait until your next cycle to start testing again. Note the length of your current cycle and use the table to determine when to start testing. Some women do not ovulate every cycle and if this happens they will not see Peak Fertility. If you are concerned about your results please see your health care professional or call the Clearblue® Helpline. Some women may not see High Fertility days but see Peak Fertility days only. This may be because the estrogen level is not high enough to be detected by the test, or they started testing too late. Peak Fertility results can still be relied upon and having intercourse on these days maximizes your chance of getting pregnant.

11 I've taken the tests as instructed and I did not see 4 fertile days. What does this mean?

In clinical testing Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test identified 4 or more fertile days (2 Peak Fertility days as well as 2 High Fertility days) in 80% of cycles. Hormone levels and cycle length vary from one woman to another and from cycle to cycle in the same woman. The number of fertile days displayed each cycle will be personal to you and some women will have fewer than 4. This doesn't mean the test isn't working. Have intercourse on High and Peak Fertility days to maximize your chance of getting pregnant.

12 I have put in a new test stick and these symbols have flashed on the display. What does this mean?

This means that the holder is ready to use for the first time. It will also be displayed if you are testing after you have seen

Peak Fertility or you have not taken a test for 3 or more days in a row. If you have missed 3 or more tests and not seen Peak Fertility the holder will think you are testing for the first time. If you carry on testing it might not detect High or Peak Fertility. It is better to wait for your next cycle to start testing again.

13 Can any medication or medical conditions affect the result?

Always read the manufacturers' instructions for any medication that you are taking before doing a test.

- Certain medical conditions and medications can give misleading results, for example:
- you are pregnant.
- you have recently been pregnant.
- you are breastfeeding.
- you have reached menopause.
- you have impaired liver or kidney function.
- you have polycystic ovarian syndrome.
- you are taking fertility drugs containing luteinizing hormone or human Chorionic Gonadotrophin (such as Pregnyl® and Profasi®).
- you are taking antibiotics containing tetracyclines.
- Some fertility treatments such as Clomid® may give misleading High Fertility results.

Peak Fertility results should be unaffected. If you have recently been pregnant you should wait until you have had 2 natural menstrual cycles and note how long these are before using Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test. Please check with your health care professional if you are taking any medication or have any medical condition before planning a pregnancy.

14 I've recently stopped using hormonal contraception (e.g. the pill) or breastfeeding. Will this affect the results?

No. However your cycles may take some time to become regular so you may wish to wait until you have had 2 natural menstrual cycles and note how long these are before using Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test.

15 Since it tells me when I am fertile can I use Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test as a contraceptive?

No. Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test is not for contraceptive use.

16 I think I'm pregnant, what should I do?

You can find out if you are pregnant up to 4 days before your expected period*** using a Clearblue® Digital Pregnancy Test. Clearblue® Digital Pregnancy Test is over 99% accurate from the day you expect your period, is easy to use and gives an unmistakably clear result in words. If your Clearblue® Digital Pregnancy Test shows you a Pregnant result you should see your health care professional, who can advise you on what steps you should take next. The earlier you see your health care professional the better it is for your own health.

17 I've used Clearblue® Advanced Digital Ovulation Test for several months and I'm not pregnant yet, is there something wrong?

It can take many months to get pregnant. There are many reasons why you may not get pregnant, even if you've been able to have intercourse at your most fertile time. If after several months you've had no success, or have not seen Peak Fertility, you should consult your health care professional.

Error Messages

18 What does this flashing symbol mean?

The test stick has been ejected too soon. If it is not re-inserted quickly enough a further error symbol will appear on the display.



19 What does this symbol mean?

An error has occurred during testing. It may be that:

- You have taken the test before inserting the test stick into the holder.
- The absorbent tip was not kept pointing downwards, or the test was not laid flat after testing.
- You put too much or too little urine in the test.
- The test stick was ejected too soon. This symbol will be displayed for 8 minutes. You should test again using a new test stick taking care to follow the instructions. If you have collected urine, use this sample to test again as soon as the display is blank. Otherwise you should test as soon as you can but avoid excess fluid intake in the meantime.



20 What does this symbol mean?

Please contact the Clearblue® Helpline. If you have unused test sticks do not use them with this holder.



21 The display has remained blank. What does this mean?

If you have not applied urine to the test stick eject it and start again from step 1. Otherwise, please contact the Clearblue® Helpline.



LIMITS OF THE TEST

Certain medical conditions may or may not affect the reliability of this test in predicting ovulation. These can include pregnancy, post-partum, menopause symptoms, breast feeding, birth control pills, some fertility medications and polycystic ovarian syndrome (PCOS). Women with medically diagnosed fertility problems should ask their health care professional if the product is suitable for them.

* Pregnyl® is a registered trademark of Organon USA, Inc.

* Profasi® is a registered trademark of Ares Trading S.A.

** Clomid® is a registered trademark of Merrell Pharmaceuticals, Inc.

*** Clearblue® Digital Pregnancy Test can be used to test up to 4 days before your expected period. In clinical testing with early pregnancy samples Clearblue® Digital Pregnancy Test gave the following results: 51% of women received a 'Pregnant' result 4 days early, 82% of women 3 days early, 90% of women 2 days early and 95% of women 1 day early.

Home ovulation test.

For *in vitro* diagnostic use only.

Store at 36° - 86°F (2°-30°C).

Keep out of the reach of children.

Do not use if the foil wrapper

containing the test stick is damaged.

Do not use a test stick that has passed its expiration date.

Do not reuse the test sticks.

Not for contraceptive use.

These instructions are for SPD model number 735025

For further information about Clearblue®, please call the Clearblue® Helpline. A 24 hour, 7 days a week recorded information service is available for your use. In addition, the Clearblue® team is available to answer your questions between 8:30am - 5:00pm Eastern Time Monday - Friday.

THE HELPLINE PHONE NUMBER IS
1-800-321-3279.

Please be ready to quote the **[LOT]** numbers on the pack. Calls may be recorded or monitored for quality control.

For next steps and information and general advice relating to issues of pregnancy, visit our website at: As prenatal care is very important for a baby's health, we recommend that you consult your health care professional before you try to conceive.

www.clearblueeasy.com

Join us at: [facebook.com/clearblue](https://www.facebook.com/clearblue)

twitter.com/clearblue

Error symbols

Error A (Flashing) See Q18.



Error B See Q19.



Error C See Q20.



Error D See Q21.



Please read the Further Information and Questions & Answers sections.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Contact the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Made in PRC. Packaged in USA. Distributed by Procter & Gamble, Cincinnati, OH 45202.

Clearblue is a registered trademark of SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. All rights reserved.

Protected by U.S. Patent Nos. 7,315,378; 7,317,532; 7,632,460; 6,228,660; 6,187,598; 5,504,013; 5,656,503; 5,622,871; 5,602,040; U.S. Design Patent Nos. D509,901; D523,964; other rights granted and pending.

The US Surgeon General advises pregnant women to abstain from alcohol consumption as this may lead to harmful effects on the baby such as Fetal Alcohol Syndrome Disorders (FASD). More information is available at www.surgeongeneral.gov

Prueba de ovulación

La prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital es la única prueba de ovulación que identifica normalmente SUS 4 mejores días para quedar embarazada, 2 más que cualquier otra prueba de ovulación.

Cómo funciona la prueba

La prueba funciona al monitorear los cambios en 2 hormonas de la fertilidad clave en la orina: la hormona luteinizante (LH) y los estrógenos. La elevación de la LH ocurre alrededor de 24 a 36 horas antes de que se libere un óvulo de los ovarios; esta es la ovulación. Detectar la elevación de la LH indica que se encuentra en el momento pico de fertilidad. El nivel de estrógeno aumenta en los días antes de la elevación de la LH y ayuda al cuerpo a prepararse para la ovulación. Detectar el aumento de estrógeno indica que se encuentra en un momento de alta fertilidad. Tener relaciones sexuales en los días de alta fertilidad y el momento pico de la misma maximiza su probabilidad de quedar embarazada.

Este ejemplo muestra cómo podrían aparecer en un ciclo los días de baja, alta y máxima fertilidad.

Determine la duración de su ciclo

Debe contar el día del comienzo de su menstruación (primer día de flujo menstrual completo) como el día 1 y luego cuente hasta el día antes de su próxima menstruación. La cantidad total de días es la duración de su ciclo. Si su ciclo es variable, vea la P1.

Determine cuándo comenzar la prueba

Utilice la siguiente tabla para determinar qué día iniciar la prueba. Si no sabe la duración del ciclo, debe esperar por lo menos un ciclo menstrual; tenga en cuenta la duración del mismo y luego utilice la tabla de abajo.

Duración del ciclo (días)	21 o menos	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 o más
Debe contar el día del comienzo de su menstruación como el Día 1; comience la prueba en el día que se muestra debajo de la duración del ciclo.	5	6	6	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20 días antes de la fecha esperada de la menstruación siguiente

Siempre realice la prueba con la **primera orina** después del sueño más prolongado.

Cómo realizar una prueba

1 Cuando esté lista para la prueba

- Quite la varilla de prueba del papel de envoltura.
- Quite la tapa de la varilla de prueba.

2 Inserte la varilla de prueba en el dispositivo



- Asegúrese de que las flechas púrpuras estén alineadas como se muestra.
- La prueba se enciende cuando se ha insertado correctamente la varilla de prueba en el dispositivo.



Indicador de nuevo ciclo (Intermitente)

- La primera vez que utilice la prueba, los símbolos del nuevo ciclo **parpadearán** brevemente. Si se muestran estos símbolos y no es la primera vez que utilizó la prueba, vea la P12.



Prueba Lista

- A continuación se mostrará el símbolo de que la prueba está lista.
- Ahora debe realizar la prueba de inmediato.
- Si el símbolo de que la prueba está lista no aparece O si la pantalla se queda en blanco, expulse la varilla de prueba y vuelva a insertarla con cuidado.
- Si el símbolo de que la prueba está lista no se ve aún, vea la P21.

3 Elija el modo de realizar su prueba

Cualquiera

- Coloque sólo la punta absorbente hacia abajo en el flujo de orina durante 3 segundos.
- Tenga cuidado de que el dispositivo no se moje.



- Puede recoger una muestra de su orina en un recipiente limpio y seco.
- Sumerja solo la punta absorbente en la muestra de orina que recogió durante 15 segundos.

- Vuelva a colocar la tapa. Seque cualquier exceso de orina. Mantenga la punta absorbente hacia abajo o deposite la prueba en posición horizontal.

4 Espere el resultado



Durante el primer minuto, verá que la prueba está funcionando ya que el símbolo de que la prueba está lista comenzará a **parpadear**.



Después de 5 minutos la pantalla mostrará el resultado.

- Si el símbolo de que la prueba está lista no comienza a parpadear, vea la P4.

5 Cómo leer el resultado



Baja fertilidad

- Tener relaciones sexuales hoy es sólo por diversión, ya que es poco probable, pero no imposible, que vaya a quedar embarazada. Realice la prueba de nuevo mañana con la primera orina después del sueño más prolongado. Se mostrará el resultado durante 8 minutos.
- Si la pantalla se queda en blanco después de la prueba y piensa que no logró ver el resultado, simplemente expulse la varilla de prueba y el resultado aparecerá de nuevo durante otros 2 minutos.



Alta fertilidad

- Tenga relaciones sexuales hoy para aumentar sus probabilidades de quedar embarazada. Recuerde que todavía debe realizar la prueba de nuevo mañana con la primera orina después del sueño más prolongado. Se mostrará el resultado durante 8 minutos.



Pico de fertilidad


- Este es su período más fértil y se mostrará durante 2 días. Tenga relaciones sexuales durante estos 2 días para maximizar sus probabilidades de quedar embarazada. Puede detener la prueba después de que se muestra el primer día del momento pico de fertilidad. Si tiene varillas de prueba sin utilizar, guárdelas, al igual que el dispositivo, para el ciclo siguiente.

Botón de Expulsión



6 Cuando haya finalizado la prueba

- Expulse la varilla de prueba tan pronto como sea posible después de haber visto el resultado y deséchela en la basura doméstica normal.

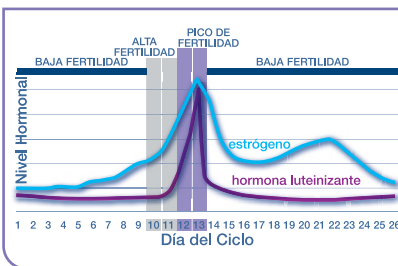

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cómo utilizar el dispositivo otra vez en el mismo ciclo

Cuando esté lista para realizar la prueba otra vez, siga las instrucciones desde el paso 1 utilizando una nueva varilla de prueba. Si el resultado todavía se visualiza, hay que esperar a que la pantalla se quede en blanco antes de realizar otra prueba.

Cómo utilizar el dispositivo otra vez en el mismo ciclo

Si está utilizando la prueba para otro ciclo, el indicador de ciclo nuevo parpadeará brevemente al insertar una varilla de prueba en el primer día de pruebas. Esto muestra que la prueba está lista para usar. Siga las instrucciones para determinar cómo comenzar las pruebas y cómo realizar una prueba. Si se muestra error, vea la P20.

Cómo reciclar las baterías y cómo deshechar el dispositivo

Quite todas las baterías del dispositivo de prueba mediante la separación de las mitades superior e inferior que empiezan en el extremo más cercano a la pantalla. Quite todas las baterías que están debajo de la cubierta metálica central. Deseche las baterías de acuerdo con el plan de reciclaje adecuado. Precaución: No desarme las baterías, no las recargue ni las arroje al fuego. No tragar. Mantenga lejos del alcance de los niños. Deseche el resto del dispositivo de acuerdo con el plan de reciclaje adecuado para los equipos eléctricos. No arroje los equipos eléctricos al fuego.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1 La duración de mi ciclo varía, ¿cuándo debo empezar a realizar la prueba?

Si la duración del ciclo varía en más de 3 días, se debe utilizar la duración del último ciclo para determinar el momento en que debe iniciar la prueba.

2 ¿Qué sucede si no logré hacer la prueba con la primera orina después del sueño más prolongado?

Debe realizar la prueba tan pronto como sea posible, pero evite el exceso de ingesta de líquidos antes de la prueba. Si no se utiliza la primera orina después del sueño más prolongado, puede ver resultados inprecisos de alta fertilidad por lo que es importante que recuerde usar la primera orina después del sueño más prolongado.

3 ¿Puedo comprar más varillas de prueba o utilizar el dispositivo con varillas de prueba de cualquier otro producto?

No. Las varillas de prueba no están disponibles en forma separada. Sólo puede utilizar varillas de prueba para la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital con el dispositivo.

4 He hecho la prueba, pero el símbolo de que está lista no ha empezado a parpadear. ¿Qué significa esto?

La prueba no se ha realizado correctamente. Un símbolo de error aparecerá en la pantalla dentro de los 10 minutos de la prueba. Debe volver a realizar la prueba con una varilla de prueba nueva. Vea 'Cómo usar el dispositivo otra vez en el mismo ciclo'.

5 ¿Qué sucede si el dispositivo se moja?

Debe secarlo. Algunas salpicaduras no son un problema pero si se moja mucho, el dispositivo puede dañarse. Si esto sucede, la pantalla permanecerá en blanco o bien aparecerá un símbolo de error.

6 He hecho la prueba pero el resultado no ha aparecido. ¿Qué significa esto?

El resultado debe aparecer 5 minutos después de que el símbolo de que la prueba está lista comienza a parpadear. Si no aparece ningún resultado, se mostrará un símbolo de error dentro del lapso de 10 minutos. Vea 'Mensajes de error'.

7 ¿Puedo determinar mi resultado a partir de las líneas en la varilla de prueba?

No. El resultado sólo se puede leer en la pantalla y no se puede determinar a partir de las líneas que se pueden ver cuando expulsa la varilla de prueba.

8 ¿Qué nivel de precisión tiene la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital?

Un ensayo de laboratorio ha demostrado que la prueba tiene más del 99% de precisión en la detección de la elevación de la LH (Pico de fertilidad). La sensibilidad de la detección de la LH en la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital es de 40mIU/ml, comparada con el Tercer Estándar Internacional de las LH y FSH en la orina para Bioensayos (71/264).

9 He realizado 10 pruebas en un ciclo y no he visto la alta fertilidad y/o picos de fertilidad. ¿Debo dejar de hacer las pruebas y utilizar el resto de mis pruebas el próximo ciclo?

Hay suficientes varillas de prueba en este envase para que la mayoría de las mujeres con ciclos regulares

Para obtener más información acerca de Clearblue®, llame a la Línea de ayuda de Clearblue®. Encontrará un servicio de información grabada disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, el equipo de Clearblue® está disponible para responder sus preguntas entre las 8:30am y las 5:00pm hora del este, de lunes a viernes.

EL NÚMERO DE TELÉFONO DE LA LÍNEA DE AYUDA ES
1-800-321-3279.

Para conocer los siguientes pasos y para obtener información y asesoramiento en general acerca de cuestiones relacionadas con el embarazo, visite nuestro sitio web en:

Como la atención prenatal es muy importante para la salud del bebé, le recomendamos consultar al médico antes de que intente concebir.

Únase a nosotros en:
[facebook.com/clearblue](https://www.facebook.com/clearblue)
twitter.com/clearblue

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglamentación de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, por su sigla en inglés). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricado en PRC. Envasado por EE. UU. Distribuido por Procter & Gamble, Cincinnati, OH 45202. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos Clearblue es una marca registrada de SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Todos los derechos reservados.

Protegido por las patentes estadounidenses N.º 7,315,378; 7,317,532; 7,632,460; 6,228,660; 6,187,598; 5,504,013; 5,656,503; 5,622,871; 5,602,040; Números de patente de diseño de EE. UU. D509,901; D523,964; otros derechos concedidos y pendientes.

pueda detectar sus momentos pico y de alta fertilidad durante 2 ciclos. Es posible que, si la duración del ciclo varía en más de 3 días, usted deba realizar más pruebas. Debe seguir las pruebas hasta que vea el momento pico de fertilidad y, si necesita más varillas de prueba para su próximo ciclo, puede utilizar las pruebas de un nuevo envase con el mismo dispositivo.

10 He realizado todas las pruebas según las instrucciones, pero no he visto la alta fertilidad y/o picos de fertilidad. ¿Qué debo hacer?

Si ha utilizado las 20 pruebas, es recomendable esperar hasta su próximo ciclo para iniciar las pruebas de nuevo. Tenga en cuenta la duración de su ciclo actual y utilice la tabla para determinar en qué momento debe iniciar las pruebas. Algunas mujeres no ovulan cada ciclo y, si esto sucede, no verán el momento pico de fertilidad. Si está preocupada acerca de sus resultados, consulte a su médico o llame a la línea de ayuda Clearblue®. Algunas mujeres no ven los días de alta fertilidad, pero ven los días de pico de fertilidad solamente. Esto puede ser porque el nivel de estrógenos no es lo suficientemente alto como para ser detectado por la prueba o por haber comenzado la prueba demasiado tarde. Aun así se puede confiar en los resultados de pico de fertilidad y tener relaciones sexuales en estos días maximiza su probabilidad de quedar embarazada.

11 He realizado las pruebas según las instrucciones y no vi 4 días fértiles. ¿Qué significa esto?

En las pruebas clínicas, la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital identificó 4 o más días fértiles (2 días de pico de fertilidad y también 2 días de alta fertilidad) en el 80% de los ciclos. Los niveles hormonales y la duración del ciclo varían de una mujer a otra y de un ciclo a otro en la misma mujer. El número de días fértiles de cada ciclo que se muestra será personal para usted y algunas mujeres tienen menos de 4. Esto no significa que la prueba no está funcionando. Tenga relaciones sexuales en los días de alta fertilidad y el momento pico de la misma para maximizar su probabilidad de quedar embarazada.

12 He puesto una varilla de prueba nueva y estos símbolos parpadearon en la pantalla. ¿Qué significa esto?

Esto significa que el dispositivo está listo para usarse por primera vez. También se mostrará si usted está realizando la prueba después de haber visto el pico de fertilidad o si no se ha hecho la prueba durante 3 días consecutivos o más. Si ha omitido 3 o más pruebas y no se ha visto el momento pico de fertilidad, el dispositivo considerará que usted realiza la prueba por primera vez. Si sigue realizando la prueba podría no detectar fertilidad alta o pico. Es mejor esperar a su próximo ciclo para iniciar la prueba de nuevo.

13 ¿El resultado puede verse afectado por algún medicamento o enfermedad?

Lea siempre las instrucciones del fabricante para cualquier medicamento que esté tomando antes de realizar una prueba. Algunas condiciones médicas y medicamentos pueden dar resultados erróneos, por ejemplo:

- está embarazada,
- ha estado embarazada recientemente,
- está amamantando,
- ha alcanzado la menopausia,
- tiene insuficiencia hepática o renal,
- tiene el síndrome de ovario poliquístico,
- está tomando medicamentos para la fertilidad que contienen hormona luteinizante o gonadotropina coriónica humana (por ejemplo, Pregnyl® y Profasi®),
- está tomando antibióticos que contengan tetraciclinas,
- Algunos tratamientos de fertilidad como el Clomid® pueden dar resultados engañosos de alta fertilidad. Los resultados de pico de fertilidad no deberían verse afectados.

14 Recientemente dejé de usar anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora) o de amamantar. ¿Esto afectará los resultados?

No. Sin embargo puede tomar algún tiempo para que sus ciclos se regularicen, por lo que es recomendable esperar hasta que haya tenido dos ciclos menstruales naturales y tenga en cuenta el tiempo de duración de estos antes de usar la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital.

15 Ya que me dice cuándo soy fértil, ¿puedo usar la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital como método anticonceptivo?

No. La prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital no es para uso anticonceptivo.

16 Creo que quedé embarazada, ¿qué debo hacer?

Puede averiguar si está embarazada hasta 4 días antes de la fecha esperada de menstruación*** por medio de una prueba de embarazo Clearblue® Digital. La prueba de embarazo Clearblue® Digital tiene más de un 99% de precisión desde la fecha esperada de inicio de la menstruación, es fácil de usar y le brinda un resultado absolutamente claro en palabras. Si la prueba de Embarazo Clearblue® Digital le muestra un resultado Positivo, debe visitar a su médico, el cual la puede asesorar sobre los pasos que debe dar a continuación. Cuanto antes visite a su médico mejor será para su propia salud.

17 He utilizado la prueba de ovulación Clearblue® Advanced Digital por varios meses, no quedé embarazada todavía, ¿hay algún problema?

Puede llevar muchos meses quedar embarazada. Hay muchas razones por las que puede no quedar embarazada, aun si ha tenido relaciones sexuales en su momento más fértil. Si después de varios meses no ha tenido éxito o no ha visto el pico de fertilidad, debe consultar a su médico.

Mensajes de error

18 ¿Qué significa este símbolo que parpadea?

La varilla de prueba ha sido expulsada antes de tiempo. Si no se vuelve a insertar rápidamente un símbolo de error adicional aparecerá en la pantalla.

19 ¿Qué significa este símbolo?

Ha ocurrido un error durante la prueba. Puede ocurrir porque:

- Ha realizado la prueba antes de insertar la varilla de prueba en el dispositivo,
- La punta absorbente no se mantuvo hacia abajo o la prueba no se puso en una posición horizontal después de efectuarla,
- Puso demasiada o muy poca orina en la prueba,
- La varilla de prueba ha sido expulsada antes de tiempo.

20 ¿Qué significa este símbolo?

Póngase en contacto con la Línea de ayuda de Clearblue®. Si tiene varillas de prueba sin usar, no las utilice con este dispositivo.

21 La pantalla permanece en blanco. ¿Qué significa esto?

Si ha aplicado orina en la varilla de prueba, expulsa la prueba de nuevo desde el paso 1. De lo contrario, póngase en contacto con la Línea de ayuda de Clearblue®.

LÍMITES DE LA PRUEBA

Ciertas condiciones médicas pueden o no afectar a la fiabilidad de esta prueba para predecir la ovulación. Estas pueden incluir el embarazo, el post-parto, los síntomas de la menopausia, la lactancia materna, las píldoras anticonceptivas, algunos medicamentos para la fertilidad y el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Las mujeres con problemas de fertilidad médicamente diagnosticados deben consultar a su médico para saber si el producto es adecuado para ellas.

* Pregnyl® es una marca registrada de Organon USA, Inc.

** Profasi® es una marca registrada de Ares Trading S.A.

*** Clearblue® es una marca registrada de Merrell Pharmaceuticals, Inc.

La prueba de Embarazo Clearblue® Digital se puede utilizar hasta 4 días antes de la fecha esperada de la menstruación. En ensayos clínicos con muestras de embarazo anticipadas, la prueba de Embarazo Clearblue® Digital obtuvo los siguientes resultados: el 51% de las mujeres obtuvo un resultado de 'Embarazada' 4 días antes, el 82% de las mujeres 3 días antes, el 90% de las mujeres 2 días antes y el 95% de las mujeres 1 día antes.

Prueba de ovulación doméstica.

Solo para uso de diagnóstico *in vitro*. Almacenar a 36° - 86°F (2° a 30°C).

Mantenga lejos del alcance de los niños. No utilizar si el envoltorio que contiene la varilla de prueba está dañado.

No utilice una varilla de prueba después de su fecha de vencimiento.

No utilice las varillas de prueba más de una vez.

No apto como método anticonceptivo.

Estas instrucciones corresponden al modelo SPD número 735025.